



Ericc3 - Des icônes

Le menu initial

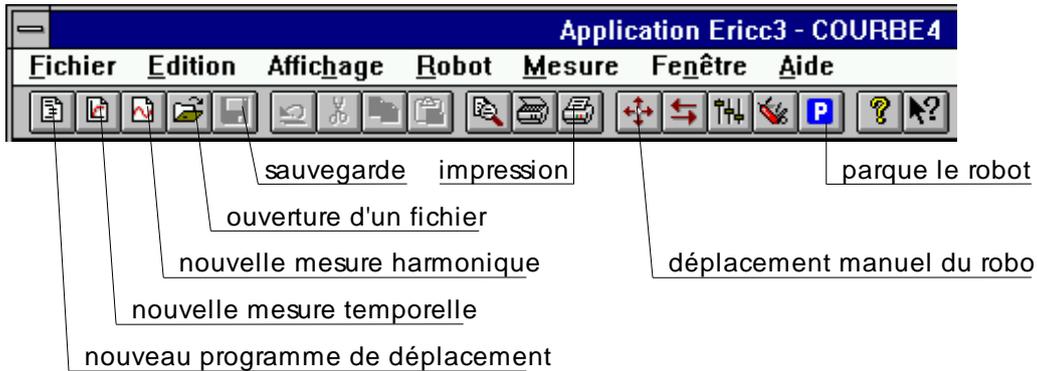

Mesure temporelle

Lancement de la mesure

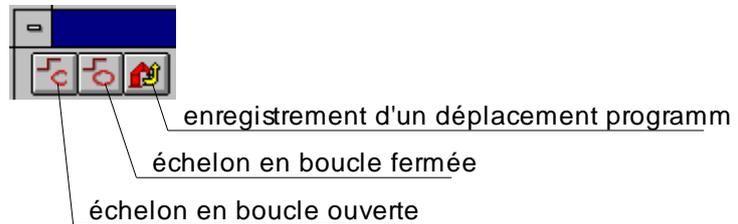

Exploitation des mesures

affiche une grille sur l'échelle à gauche

sur l'échelle à droite

modifie le pas de grille

affiche un réticule

affiche les coordonnées du réticule X(temps), Yg(auche) et Yd(roit) dans le bas de l'écran

mesure une distance

affiche (ou non) la courbe désignée

recentre les courbes pleine échelle

"désélection" d'une courbe en cliquant hors de l'affichage

zoom en englobant dans une fenêtre la partie intéressante

choix de la grandeur ordonnée à gauche

choix de la grandeur ordonnée à droite

sélection d'une courbe en cliquant dessus la touche droite de la souris permet de modifier cette courbe (couleur, points de mesure, filtrage, ...)